

DETECTE CLORANFENICOL



Teste rápido para detecção de resíduos de Anfenicol (Cloranfenicol) em amostras de leite.

INFORMAÇÕES:

Teste fácil, robusto, preciso e econômico.

Análise rápida:
6 minutos de tempo Total (testing time).

Sem necessidade de preparação da amostra e simples interpretação de resultados.

Validade de até 12 meses.

Mundialmente reconhecido pela indústria láctea.


Embalagem ecológica com 96 testes.

Incluído controle positivo e negativo.

De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.

Tecnologia da Bélgica.

Passo-a-passo

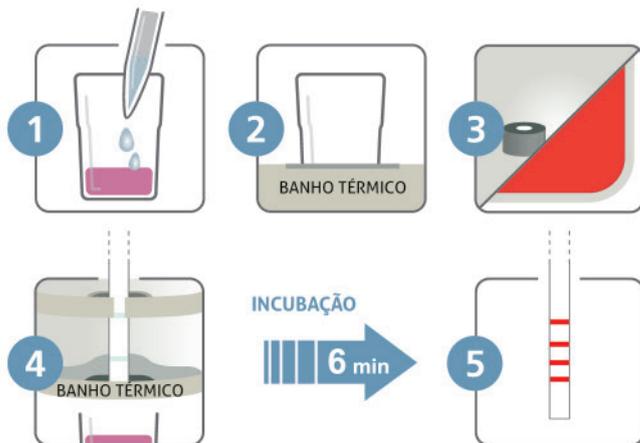

Acessórios obrigatórios



Heatsensor: banho térmico combinado com um dispenser de tiras, que permite realizar automaticamente a análise em uma única etapa.



Banho Térmico: Incubador multiposição que permite a realização simultânea de várias amostras.


Acessório opcional

Readsensor® 2: leitor portátil que interpreta e registra os resultados da tira do teste. Possui impressora integrada.



Componentes	LIMITES DE DETECÇÃO (PPB)
	KIT140
Cloranfenicol	0,1

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE

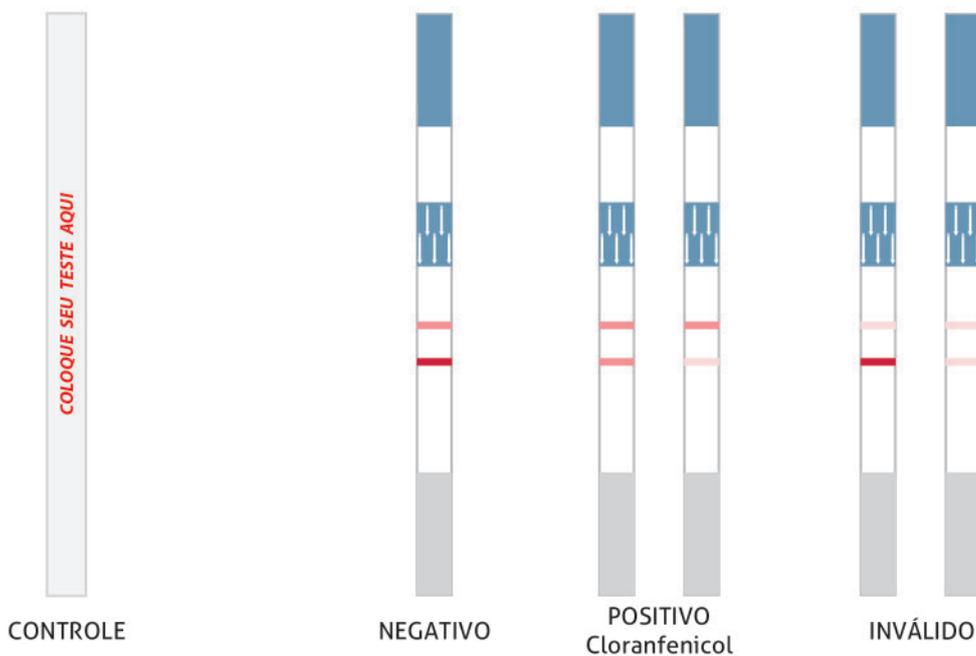

Tendo como base a linha de controle, toda linha de teste com a cor mais clara, sem formação de nenhuma coloração rósea/avermelhada ou igual a linha controle, indica resultado positivo para o grupo de antibióticos correspondente.

Conheça nossos testes para:

- Beta-lactâmicos
- Tetraciclina
- Sulfonamidas
- Gentamicina
- Cloranfenicol
- Tilosina
- Aminoglicosídeos



www.cap-lab.com.br